

# MANUAL DE UTILIZAÇÃO

CINTA MASSAGEADORA

# SlimFlex

CONFORTO E BEM ESTAR NO SEU DIA A DIA!



## Áreas de uso



COXAS



COSTAS



BRAÇOS



LOMBAR



EMBAIXO  
DOS PÉS

## Como utilizar




- 1** Vestir ou envolver no local onde desejar, pode ser usado nas costas, braços, coxas, embaixo dos pés, cintura e lombar.
- 2** Ajuste a cinta medidora de acordo com o local onde irá utilizar. "O aparelho possui uma cinta medidora, com suporte de regulagem, para melhor utilização e conforto;"
- 3** Conecte a fonte de alimentação elétrica ao aparelho e conecte-o a tomada;
- 4** Ligue o equipamento e ajuste de acordo com as instruções de uso para o tratamento indicado;
- 5** Após o termino da utilização, desligue o aparelho conforme descrito nas intruções ou pressione por 3 segundos o botão .

Posições meramente ilustrativas.

**AMARFLEX**  
SAÚDE E BEM ESTAR

### VIBRAÇÃO

Conheça detalhadamente cada uma das 5 funções de vibração.

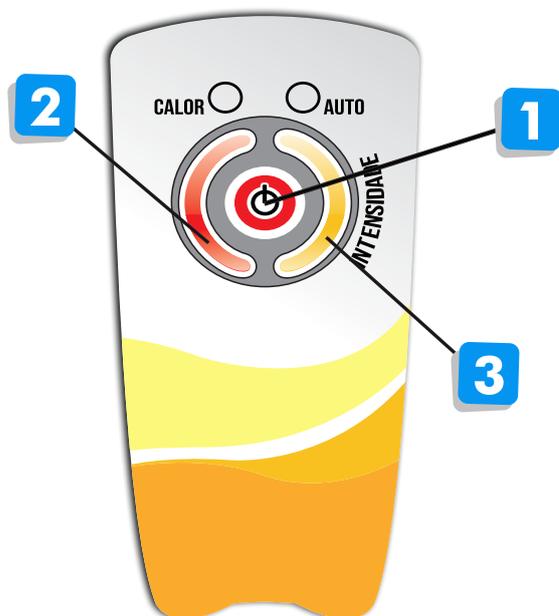

1 - Vibração constante;

2 - Vibração oscila de 0 em 0 segundo;

3 - Vibração oscila de 1/2 em 1/2 segundo, dando sensação de formigamento;

4 - Vibração oscila de 1/2 em 1/2 segundo, e no final se mantém por 01 segundo;

5 - Vibração oscila do lado direito para o esquerdo por 1/2 segundo e vibra constantemente

**1** CINTA - Para começar a usar, aperte o botão ligar, isso fará que o produto inicie no modo automático, com tempo de funcionamento padrão de 30 minutos.

**AUTO**

#### MODO AUTOMÁTICO

O modo automático a cinta vibrará por um minuto e mudará a massagem.

São 5 tipos diferentes de massagem e sua identificação é através de uma lâmpada LED do lado direito acesa.

**M**

#### MODO MANUAL

Para acessar diferentes tipos de massagem, acione o botão central. **1**

O LED direito se apagará e pode-se escolher entre 5 tipos diferentes de massagem. Ao apertar 5 vezes, a cinta retorna ao modo automático.

**2** CALOR - Quando pressionado o botão CALOR, que está ao lado esquerdo do controle, o LED ficará aceso. O Produto aquecerá pelo tempo máximo de 30 minutos e depois se desligará.

**3** INTENSIDADE - É a intensidade da vibração, que se inicia no mínimo. São 3 níveis de intensidade, que quando pressionado aumenta. Ao chegar no máximo ela diminui com um novo toque, iniciando um novo ciclo.

CINTA MASSAGEADORA

**SlimFlex**

CONFORTO E BEM ESTAR NO SEU DIA A DIA!

